

SOLO MH

Lit médicalisé
anti-ligature



Pineapple



Avec l'augmentation de l'espérance de vie, le nombre de patients souffrant à la fois de maladies mentales et physiques est devenu plus important.

Cette comorbidité peut entraîner une augmentation du nombre de patients ayant besoin d'un suivi psychiatrique associé à des besoins complexes en matière de mobilité.

Le lit Solo MH, alimenté par batterie sans fil, est conçu pour répondre à ces problématiques en réduisant les risques de

ligatures et en protégeant les zones sensibles grâce à des panneaux anti-intrusions.

Il offre un soutien réglable du dos et des jambes, réduit le risque d'escarres et facilite la respiration. Il possède 5 fonctions dont une position fauteuil pré-programmée.

CONÇU POUR LA SÉCURITÉ

L'accès aux mécanismes internes est protégé par des panneaux anti-intrusions et les risques de ligature sont minimisés.




Panneaux anti-intrusions
Fabriqués en polycarbonate incassable, les panneaux anti-intrusions contribuent à réduire les risques de ligature et à empêcher des manipulations abusives.



✓ Hauteur ajustable

Contrôlé par une télécommande sans fil, le niveau du Solo MH varie de 19 cm à 81 cm, assurant ainsi une hauteur poplitée pour se relever du lit en sécurité.

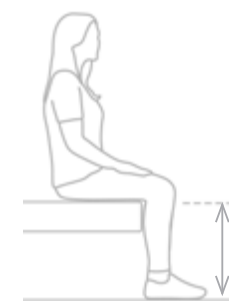

Hauteur poplitée



✓ Facile à manoeuvrer

Grâce à un choix d'options de roues pivotantes, le lit peut être facilement manoeuvré, même en cas de changement de niveau de sol.

→ Roulettes doubles de 75 mm

→ Roulettes simples de 100 mm à l'extrémité de la tête, roulettes jumelées de 75 mm à l'extrémité du pied



∧ Angles arrondis

L'ensemble des angles du lit Solo MH sont arrondis pour assurer la sécurité des usagers. Des panneaux anti-intrusions en polycarbonate protègent le système interne des manipulations inadéquates ou agressives.

En position basse, le lit recouvre le système de freinage.

✓ Barrières latérales en option

Construites en 3 sections pour faciliter le transfert et l'aide au lever en toute sécurité.

Les panneaux en polycarbonate minimisent les risques de ligature et sont sécurisés par des fixations inviolables.

En position ultra-basse, la fonction brevetée AutoLock™ verrouille automatiquement les barrières latérales et le système de freinage en place.



◀ Contrôle sécurisé

Le patient et le personnel soignant disposent de nombreuses options de positionnement grâce à son plan de couchage multisectionnel en 4 parties, des réglages incrémentaux précis et un contrôle global des angles.



5 FONCTIONS POUR LA PSYCHIATRIE

Solo MH est l'unique lit médicalisé du marché sans fil et sur batterie avec 5 fonctions.



Positionnement précis du patient


Le patient et le personnel soignant disposent de nombreuses options de positionnement grâce à son plan de couchage multisectionnel en 4 parties, des réglages incrémentaux précis et un contrôle global des angles.

✓ Dossier et repose pieds surélevés

Le relève-buste surélevé permet d'améliorer la respiration (et l'oxygénation), de favoriser le drainage lymphatique et d'offrir plus de confort au patient.

Les pauses automatiques aux angles de 30° et 45° permettent de positionner efficacement le patient et réduisent l'incertitude pour le personnel soignant.

Le positionnement des jambes peut également être ajusté pour assurer la circulation sanguine et le confort du patient.

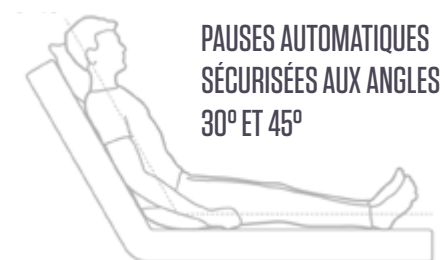

✓ Mouvement elliptique

Le dossier électrique s'allonge au fur et à mesure qu'il s'articule, prolongeant la plate-forme jusqu'à 23 cm lorsqu'il atteint un angle maximal de 70°.


Cette caractéristique permet d'éliminer les cisaillements ou frottements associés au redressement du patient.



✓ Position Fauteuil


Il suffit d'appuyer sur un bouton pour que le lit se positionne en fauteuil. Le dossier et les jambes sont relevés et le lit est incliné vers l'avant.

Le patient est en position verticale ce qui favorise la fonction respiratoire et peut aider le patient à s'acclimater à une position plus droite avant le lever. Cela permet de réduire le risque de chute.

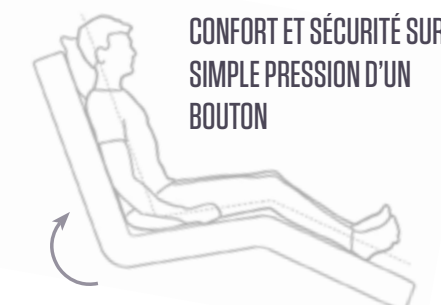

✓ Angle de Trendelenburg

Le patient étant allongé sur le dos, l'angle du lit peut être réglé entre -14° et +14°. Les avantages peuvent inclure l'amélioration de la fonction respiratoire et de la circulation sanguine, ainsi qu'un meilleur accès au personnel soignant.

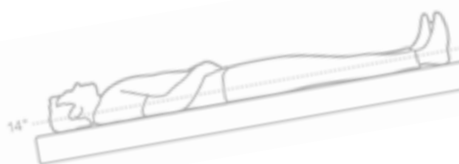

✓ Alimentation sur batterie

Le fonctionnement sans fil grâce à une batterie rechargeable intégrée minimise les risques de ligature et facilite les déplacements.



Durée d'utilisation

A charge pleine, le lit Solo MH a une autonomie estimée de 3 semaines.



CE



Lit médicalisé SOLO - Simple panneau
 Code: 1SOA-100
 Taille du lit : 19-81 H | 227 L | 106 l (cm)
 Poids : 138 kg
 Charge de travail sécurisée : 258 kg



Lit médicalisé SOLO - 3 panneaux
 Code: 1SOA-200
 Taille du lit : 19 -81 H | 225 L | 103 l (cm)
 Poids : 149 kg
 Charge de travail sécurisée : 258 kg



Matelas Profilé FLEX
 Code: 1FLEX910-1930-152-C5
 15,2 H | 193 L | 91 l (cm)

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES - LITS

- Panneaux anti-intrusions pour réduire les risques de ligature et empêcher des manipulations abusives
- Hauteur poplitée ajustable de 19 cm jusqu'à un maximum de 81 cm
- Large choix de réglages de la position pour favoriser les résultats cliniques
- Fonctionnement sans fil grâce à une batterie rechargeable intégrée et un boîtier sans fil
- Facile à manoeuvrer avec des roues avant directrices et des roues arrières équipées de freins qui sont rétractables en toute sécurité lorsqu'elles ne sont pas utilisées

OPTIONS - LITS

- Disponible avec trois panneaux latéraux qui peuvent être ajustés individuellement
- Disponible avec une tête de lit intégrée pour faciliter le transport du patient

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES - MATELAS

- Matelas de type gaufrir pour s'adapter à l'ensemble des réglages du lit médicalisé et limiter les risques d'escarres
- Coutures thermosoudées résistantes à l'eau
- Surface hygiénique facile à nettoyer
- Conforme à la norme BS7177:2008+ A1:2011 Crib Source 7 / Classe A

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur min. : 19 cm

Hauteur max. : 81 cm

Charge de travail sécurisée : 258 kg

Max. poids du patient : 193 kg

Angle max. du dossier 70°

Angle max. du genoux 30°

Angle max. du mollet 20°

Angle global du lit : + 14°/- 14°

Lit avec simple panneau

Poids du lit : 138 kg

Longueur et largeur : 227 cm x 106 cm

Dimensions du plan de couchage multisectionnel : 206 cm x 93 cm

Lit avec 3 panneaux latéraux

Poids du lit : 149 kg

Longueur et largeur : 225 cm x 103 cm

Dimensions du plan de couchage multisectionnel : 206 cm x 91 cm

Contactez-nous...

Pour organiser une démonstration ou réserver une visite de notre showroom, veuillez composer le +33 (0)1 70 70 82 60 ou envoyer un courriel à contact@pineapplecontracts.com

Pineapple, 13 rue Louis Aragon, ZI La Vignasse, 07800 La Voulte-sur-Rhône (France)

T +33 (0)1 70 70 82 60

E contact@pineapplecontracts.com

W fr.pineapplecontracts.com

Pineapple